

SQ.line® KERRISON Knochenstanze

So Clean!


1 | Zerlegen



1 Inneres Griffteil schließen.



2 Goldenen Riegel vollständig herunterdrücken und den Griff loslassen.

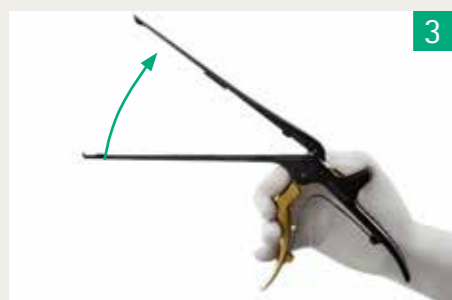

3 Schieberteil öffnen.

2 | Reinigung



Knochenstanzen zur Reinigung in geöffneter Stellung im Korb platzieren.



Alternativ die Knochenstanzen zur Reinigung im SQ.line® KERRISON Rack (JF125R oder JF126R) platzieren.


3 | Wartung




Die beweglichen Teile (Scharniere, Riegel und die Kontaktfläche des Schieberteils) sollten mit einem sterilisierbaren und dampfdurchlässigen Öl, wie Sterilit® Pflegeöl (JG598 oder JG600) geschmiert werden.



4 | Zusammensetzen

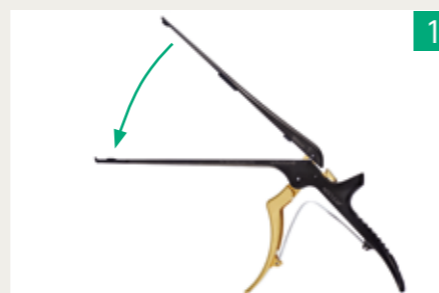

1 Schieberteil schließen.

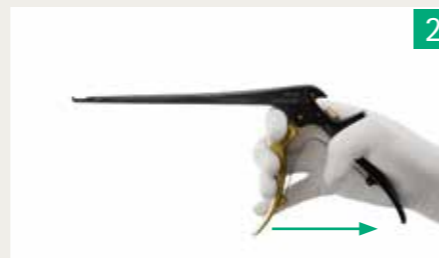

2 Inneres Griffteil schließen und loslassen.



3 Der goldene Riegel schließt sich von selbst.

5 | Funktionsprüfung



Prüfen, dass die Knochenstanze ordnungsgemäß funktioniert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die B. Braun Austria.

☎ Telefon +43 2236 46 541-0

✉ bbraun.austria@bbraun.com

6 | Lagerung



Knochenstanzen in geschlossener Stellung in einem Siebkorb oder alternativ im SQ.line® KERRISON Rack (JF125R oder JF126R) lagern.

7 | Sterilisation



Bitte die Gebrauchsanweisung (TA018250) beachten.

<https://eifu.bb Braun.com/eIFU/TA018250>